



CSQ XSENSOR[®] Technology Corporation
Innovators in Pressure Imaging

where
skin
meets
fabric
dairtex



Telefoni: 063279658,
063220781

Veleprodaja: 063220779,
063220259

Antidekubit



Artikal: **FLY PAD**


Nad-Dušek sa vazduhom promenljivog pritiska.od PVC-a, spojen HF-om sa odgovarajućom elektrodom koja stvara, na jedinstvenom komadu ćelije koje komuniciraju, međusobno se smenjujući.

Dušek je napravljen od nezapaljivog PVC-a i može se koristiti i preko običnog dušeka.


Ima trake za pričvršćivanje na dušek koji je ispod.

Potrebna je i odgovarajuća pumpa

AIR SISTEM 2

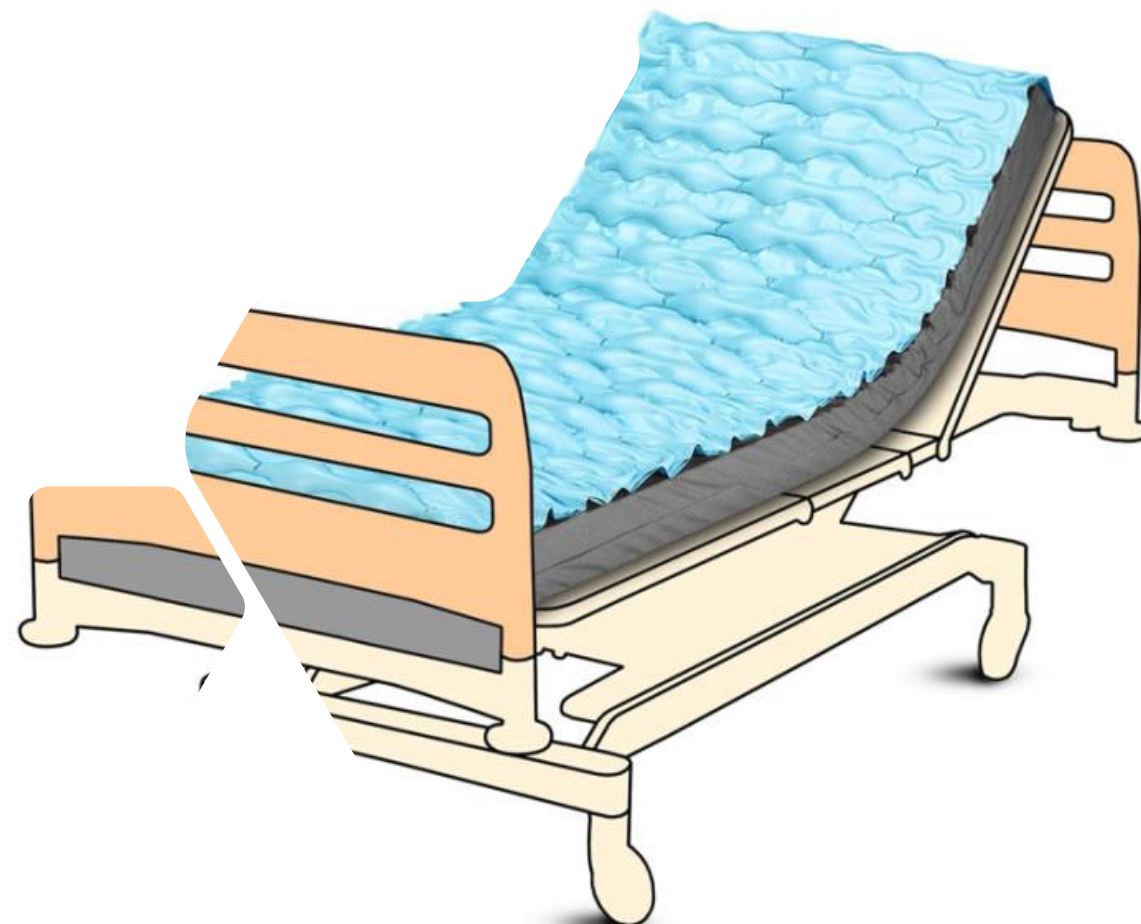


MADE IN ITALY

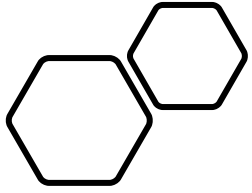

Dušek od tri dela – Ventilirani ekspaniran
trodelni dušek
Artikal: POLYMAT 14 Standard 40HR 14 cm

- Ventilirani dušek od ekspaniranog poliuretana realizovan od materijala sa niskim gubitkom nosivosti kako bi se tokom vremena održala elastičnost proizvoda.
- Sastoji se od tri dela da bi se koristio na trodelnim krevetima i zbog eventualne zamene delova koji se previše deformišu.
- Delovi su povezani oblim profilima kako bi se poboljšala cirkulacija vazduha i svela na minimum deformacija dušeka.



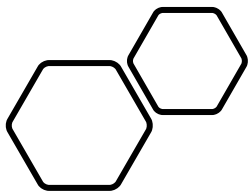

Dušek promenljivog pritiska – antidekubit

Artikal: AIR SYSTEM 16 L

- Dušek sa promenljivim pritiskom-snažna podrška – za pacijente koji su u riziku od dobijanja rana od pritiska tela.
- Dušek je sastavljen od 20 zamenljivih, cilindričnih ćelija, 9.5 cm prečnika, zajedno na pokrivci od PVC-a sa specijalnim kaiševima i obezbedjen sa kopčama koje se automatski učvršćuju.
- Ćelije su medjusobno povezane alternativno sa plastičnim crevima, tako da formiraju dva odvojena dela sa ćelijama koje se naduvavaju.
- Alternirajući pritisak se svakih pet minuta i manje od 5mm Hg izreguliše za 50% ciklusa.
- Da bi se izbeglo pomeranje glave, poslednjih pet ćelija ostaju naduvane, zahvaljujući specijalnom ventilu(neobavezno) i postoji mogućnost brzog izduvavanja sa CRP ventilom.
- Pritisak se reguliše prema pacijentu kako bi mu se omogućila udobnost (sa AS1 ili AS1P kompresorima).
- Ovim dušecima su potrebni kompresori (nisu u pakovanju)



Antidekubitalni dušek – Vazdušni dušek sa zamenljivim ćelijama od najlona i poliuretana
Artikal: AIR SYSTEM PRO I PLUS antidekubitis



- Vazdušni dušek sa naizmeničnim pritiskom, dinamičnog tipa, za prevenciju od nastanka dekubitusa, sastavljen od 18 cilindričnih ćelija, od najlon/poliuretana, zamenljivih u slučaju oštećenja, fiksiranih sa odgovarajućim trakama, automatski zakopčanih i međusobno naizmenično povezanih.
- Sistem je opremljen sa statik ćelijama koje obezbeđuju da ne dolazi do pomeranja u zoni glave i adekvatne uslove za eventualnu reanimaciju pacijenta sto obezbeđuje CRP ventil.
- Navlaka, izrađena od elastične tkanine koja diše, fiksira dušek i štiti ga tako da olakšava održavanje i čišćenje duška.
- Radi bezbednosti pacijenta, dušek poseduje kaiševe sa automatskim zatvaranjem, za fiksiranje za krevet na uzglavlju i kod nogu. Korišćenje sa kompresorom [Air System 2](#)

Kompresor za dušek – promenljivog pritiska Artikal: AIR SISTEM 2

- Kompresor promenljivog pritiska kompatibilan sa sistemima na vazdušne puteve i zamenjivim elementima, proizveden u Italiji prema standardima ISO 9001, a u skladu sa normativom CEI 601.1 i podvrgnut je godišnjoj proverbi od strane instituta IMQ.
- Pogodan je za kućnu i bolničku upotrebu, pumpa ima i regulator pritiska elektronskog tipa kako bi se omogućio bolji pritisak dušeka u skladu sa težinom pacijenta.
- Naizmenični ciklus od 5 minuta, zajedno sa fazom kompenzacije pritiska, pomaže osobi koja vodi brigu o pacijentu u sprečavanju pojave prevoja od dekubitisa.
- Posедуje ručke za korišćenje na krevetima u vertikalnom položaju i kablom za napajanje od 3 metra koje se lako mogu odvojiti od aparata radi lakše i brze zamene.
- Velika pouzdanost proizvoda, sa povraćajem u garantnom roku manjim od 0,7% za kompresore.
- Proračun izvršen prema procesu ISO 9001.






Antidekubitalni jastuci

- Pomaze sprečavanju dekubita.
- Optimizacija komfora.
- Za stolicu ili kolica, različitog oblika i materijala.

Memori jastuk

- Anatomski Memori jastuk ne pogoduje biološkim agencima (grinje, bakterije, gljivice) U njega ne može prodrati prašina pa je i antialergijski.
- ***Smanjuje bolnost vrata, nesanicu, pruža prirodan položaj vrata i glave, kao preventiva kod dehidracije usne šupljine, pharyngitisa, laryngitisa***

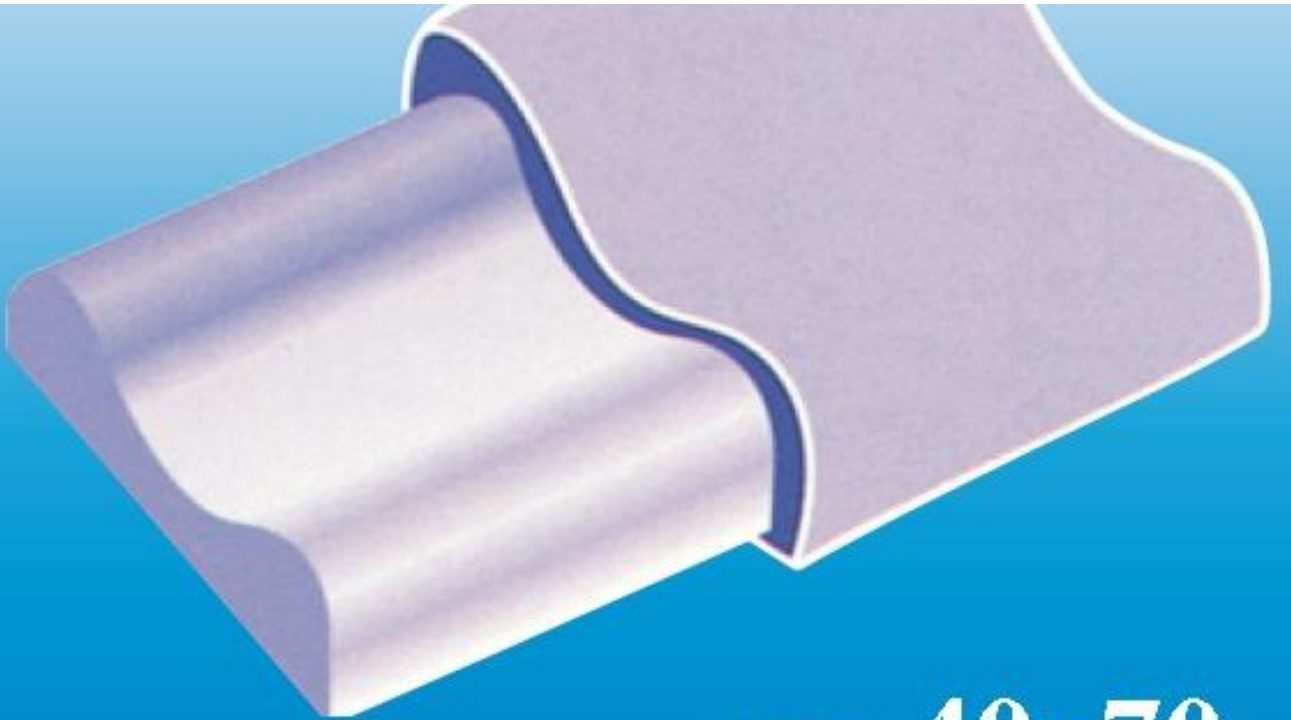

cm 40x70



Jastuk za stolicu za pravilno držanje kičme

- Memori dušek za leđa pri dužem sedenju sa dve elastične trake koje sigurno drže poziciju na stolici, bez pomeranja.
- ***Smanjuje bolnost leđa, pruža prirodan položaj leđa i glave, kao preventiva kod dužih sedenja.***

